


ニューポートベンチレータモデルE100シリーズ

モデルE100M

ロングセラーの背景は基本性能の充実です。

ニューポートはグローバルスタンダードな
IMV+PEEP人工呼吸器として全世界で使用されています。

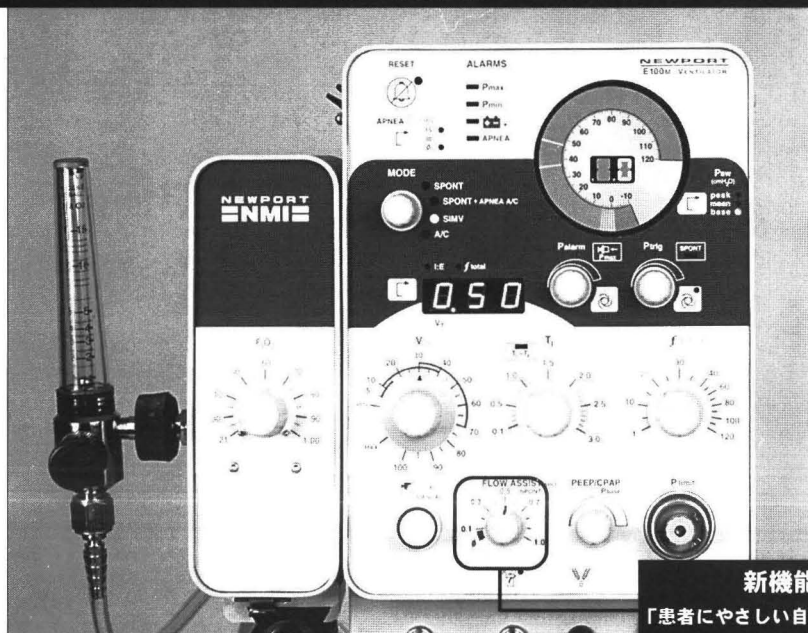

新機能

「患者にやさしい自発吸気補助」
フローアシスト

内蔵バッテリー

予期せぬ停電や、ACコンセントの引き抜き事故の安全策、また患者搬送に有効です。

電子マノメータ

機械式マノメータのイメージを生かした電子式に変更し、同時に患者口元での圧測定を可能にしました。

無呼吸+バックアップ換気

待機時間内に無呼吸を検知した場合、A/Cで設定された呼吸回数をバックアップします。

自動警報設定

押しボタンで適切な範囲の気道内圧警報値が自動設定されます。

リモートアラーム消音

リモートスイッチによる警報音の消音機能は、ベッドの反対側からでも清潔な手を汚すことなく看護処置ができます。

フローアシスト(流量補助)

SIMVやSPONT.モード時の自発呼吸に対して、流量ダイヤルと同じ流量を設定時間内供給します。

販売名:ニューポート ベンチレータ モデルE100シリーズ

医療用具承認番号:20700BZY0118

輸入元:株式会社 佐多商会



株東機貿および株佐多商会は医療機器輸入販売に関する一貫業務について、国際規格「ISO9002」の認証を取得しています。
(1998年7月3日認証取得)



株式会社 東機貿

販売元 本社 〒106-8655東京都港区東麻布2-3-4


東京	〒140-8644東京都品川区東品川2-5-8天王洲パークサイドビル13F
tel.	03 5461 3031
fax.	03 5461 3041
札幌	tel. 011 717 0350
fax.	011 758 3901
仙台	tel. 022 211 4551
fax.	022 211 4510
名古屋	tel. 052 775 7800
fax.	052 775 7830
大阪	tel. 06 6308 8311
fax.	06 6308 8353
福岡	tel. 092 271 4695
fax.	092 271 4669
福岡支店	tel. 03 5762 3005
fax.	03 5762 3035

ホームページ <http://www.tokibo.co.jp>

MR850 加温加湿器

最適な加温加湿

患者に最適な加温加湿ガスを送気することにより、
分泌物の除去作用を維持し、ガス交換の効率をあげ、
感染の危険を抑えることができます。

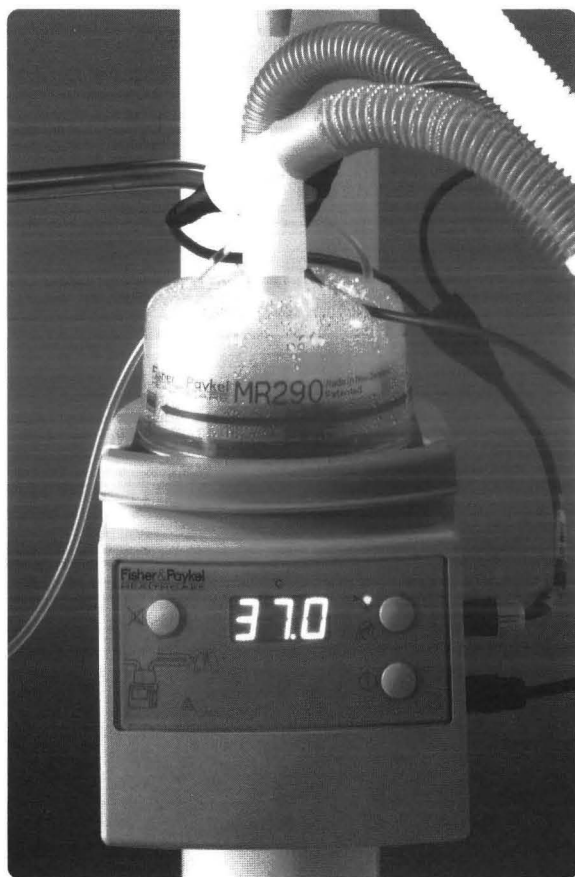

シンプル

- パネルには操作ボタン3つと警報表示のみ。
- 気管内チューブモードとマスクモードのいずれかを選択。本体が自動的に加温加湿レベルを調節。
- 一目で分かるセットアップインジケータ。
- 接続を容易にした、コネクタ類の色分け。

安全

- 患者へ流れるフローを感知し、自動的に加温加湿レベルを調節して結露を抑えます。
- 加温加湿チャンバーが空の状態で作動していないかを感知します。

高性能

- 最新のアルゴリズムの採用により、温度と湿度をモニタリングします。不要な警報が発生することなく加温加湿の最適化を行います。

理想的な加温加湿システム

- 患者の加温加湿を最適化
- 信頼性と安全性
- 取り付けが簡単

フィッシャー・パイクエル社は新しくMR850加温加湿器、MR290自動給水式チャンバー、ディスプレイ呼吸回路の組み合わせにより、患者に最適な加温加湿を提供します。

販売名：MR850加温加湿器
医療用具承認番号：21100BZY00001
輸入元：株式会社 佐多商会



株東機貿および株佐多商会は医療機器輸入販売に関する一貫業務について、国際規格「ISO9002」の認証を取得しています。
(1998年7月3日認証取得)



株式会社 東機貿

販売元 本社 〒106-8655東京都港区東麻布2-3-4

東京 〒140-8644東京都品川区東品川12-5-8天洲パークサイドビル13F
tel. 03 5461 3031 fax. 03 5461 3041
札幌 tel. 011 717 0350 fax. 011 758 3901
仙台 tel. 022 211 4551 fax. 022 211 4510
名古屋 tel. 052 775 7800 fax. 052 775 7830
大阪 tel. 06 6308 8311 fax. 06 6308 8353
九州 tel. 092 271 4695 fax. 092 271 4669
テクニカルサービス部 tel. 03 5762 3005 fax. 03 5762 3035
ホームページ <http://www.tokibo.co.jp>