

1患者専用 コストパフォーマンスの実現

呼吸療法用品シリーズ

Respiratory and Anesthesia Products Series

圧力を一定以下に制限し、肺の損傷を防ぐAPLバルブ付。


新生児用(吸引ポート付) ▶

気道内の分泌吸引の際に、患者から回路を外さずに、吸引ポートから吸引チューブが挿入できます。

用途	バッグ	吸引ポート	蛇管
新生児用	0.5L	●	φ15mm・30cm
小児用	1 L	●	
成人用	2 L		φ22mm・30cm

ジャクソン
リース **蘇生回路**


Jackson-Rees Breathing Circuits

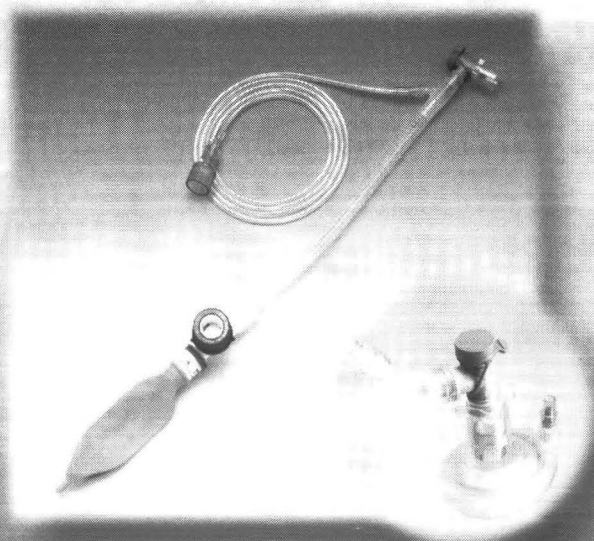

ダブルスイーベルエルボ ▲
(新生児用・小児用に装備)

Effect of Cap Rotation on Relief Pressure Adjustment


tested in the upright position at 50LPM

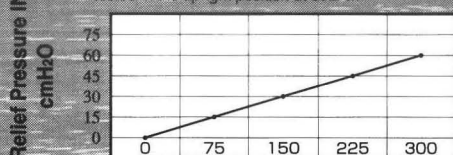

Cap Rotation in Degrees

Valve performance at FULLY CLOSED position

Resistance to Gas Flow
in cmH₂O

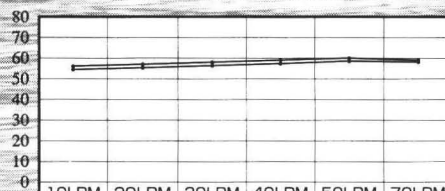

• Upright Position	56	57	58	59	60	59
• Inverted Position	54.4	55.3	56.3	57.3	58.5	58.1



アトムメディカル株式会社

東京都文京区本郷3-18-15 ☎03(3815)2311 大代表

<http://www.atomed.co.jp>