


簡単、正確、コンパクト。その場で驚異の60秒測定!!

電極／試薬のカートリッジ化で完全メンテナンスフリー化を実現

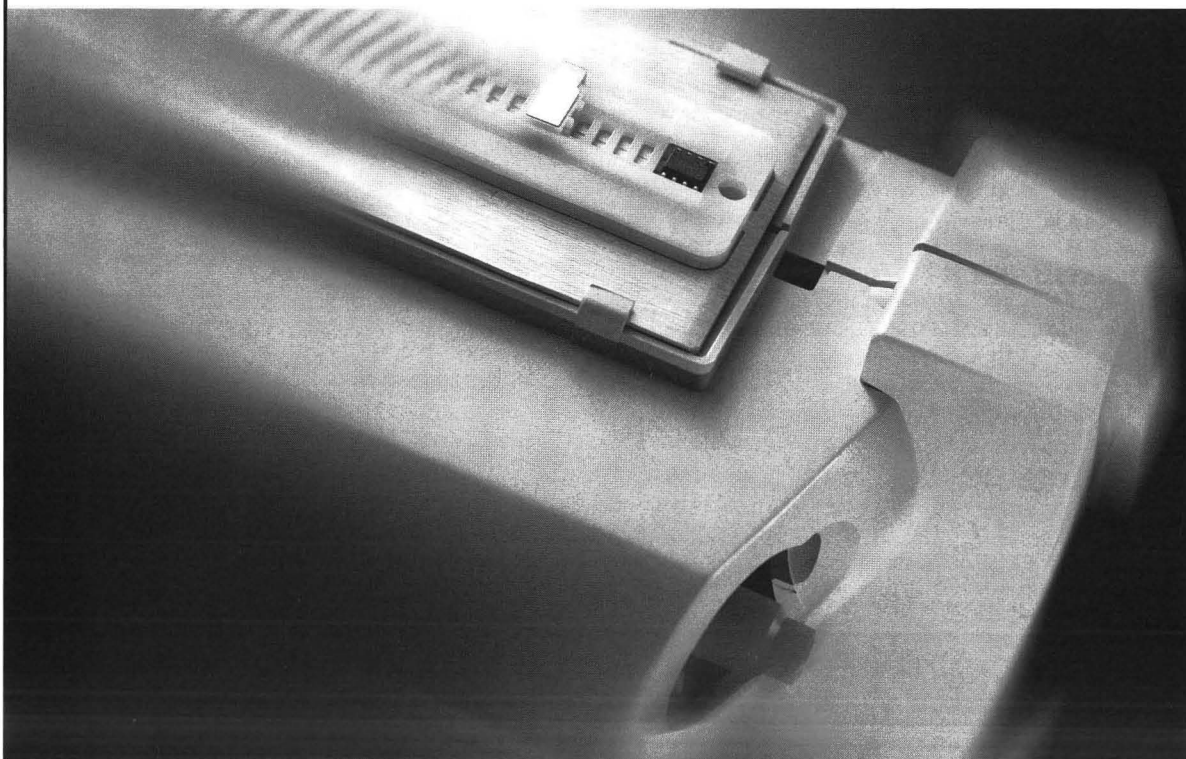

全自動pH/血液ガス・電解質・グルコース・ヘマトクリット分析装置

Rapidpoint 400



●医療器具承認番号:20900BZY00770000

ワンショットで血液ガス、電解質、グルコース、ヘマトクリットの測定が可能。ガスボンベ不要のコンパクトボディで手術室やICU、患者のベッドサイドで素早くデータを提供します。

- 測定時間はわずか60秒!
- 定期的に電極／試薬のカートリッジを交換するだけでいつでも測定可能。
- シリンジはもちろん、キャピラリーサンプルもアダプターなしで測定可能。
- 自動クロット検知および除去機能搭載、クロット吸引時のダウンタイムを最小限にし、検体を無駄にしません。
- QCスケジュールを任意に設定可能。画面にメッセージを表示し、計画通りのQC測定をサポート。
- 内蔵イーサネットポートにより、院内ネットワークとの接続にも柔軟に対応。

測定項目▶

pH、 $p\text{CO}_2$ 、 $p\text{O}_2$ 、 Na^+ 、 K^+ 、 Ca^{++} 、 Cl^- 、グルコース、ヘマトクリット

演算項目▶

HCO_3^- (act/std)、BE (B/ecf)、 ctCO_2 、RI (T)、 O_2SAT (est)、 ctHb (est)、 $p\text{O}_2/\text{FiO}_2$ 、 Ca^{++} (7.4)、AnGap

■ バイエル メディカルの尿・糖尿病・血液学・血液ガス・免疫化学検査製品を医療の現場でお役にください。

バイエル メディカル株式会社
東京都渋谷区恵比寿1丁目19番15号
電話:03-3440-4881

JG0301

Bayer 

バイエル メディカル

Making a positive
difference to human health

Bayer Medical

もっと元気な、未来のために
私たちは一つのハートになりました。バイエル メディカル です。
バイエル・三共株式会社とカイトン株式会社は、一つになってバイエルメディカル株式会社になりました。


まだ、検体測定に
多くの時間をかける
つもりですか。



800シリーズ血液ガスシステム

承認番号：20600BZY00235000

860

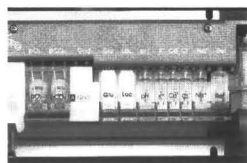


860電極モジュール

全自動pH/血液ガス・電解質・グルコース・ラクテート(代謝項目)分析装置

- 血液ガスから電解質、そしてグルコース・ラクテートまでワンショットで測れます。
- メンブラン交換のいらないメンテナンスフリーの小型グルコース電極が、10~999mg/dlまでの測定を可能に。又、同様のラクテート電極で0~270mg/dl (0~30mmol/l)までの測定が可能。ICU、オペ室で実力を発揮します。

850

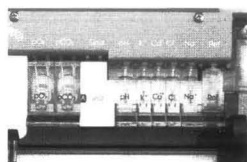


850電極モジュール

全自動pH/血液ガス・電解質分析装置

- 血液ガスの測定に加え、 Na^+ 、 K^+ 、 Cl^- 、 Ca^{++} を短時間で正確に同時測定することが可能です。
- メンブラン交換のいらないメンテナンスフリー電極を採用。

840

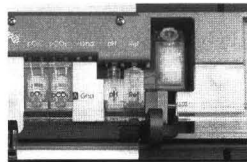

840電極モジュール

全自動pH/血液ガス分析装置

- どなたでも簡単に扱え、しかも正確なデータが得られる新時代血液ガス分析装置のベーシックモデル。
- メンブラン交換のいらないメンテナンスフリー電極を採用。

- 採血器具を横置きに、しかも器械が判断して自動吸引。感染症などのリスクも回避しています。
- ウィンドウタイプの大型ディスプレイで操作手順・内容を表示しています。
- 測定と並行して吸引口を自動洗浄。スタンバイモードでいつでも検体測定が可能です。

- 内蔵DMSでデータの登録・更新・検索処理も簡単です。
- 微量検体はスプリットモードのマニュアルの操作で測定。NICUなどにも最適です。
- 800シリーズは電極モジュールの交換でグレードアップができます。
- 上記モデルには、COオキシメーターを接続可能。ヘモグロビン及びその分画をワンショットで測定可能で

バイエル メディカル 株式会社

東京都渋谷区恵比寿1丁目19番15号 ウノサワ東急ビル 電話:03-3440-2411