

マイクロプロセッサ ベンチレータ

7200ac

“J”バージョン登場

更に呼吸仕事量を軽減するフローバイ2.0が搭載されました。


フローバイ2.0

呼吸仕事量の軽減

- PSV、PCVはもとより、全ての呼吸モードで患者の呼吸努力はフロートリガリングになります。
- 患者の自発吸気に対し、180Lpmまで応答します。

安全対策


- Breath by Breathで換気量を測定します。
- 全てのアラームが働きますから安全です。

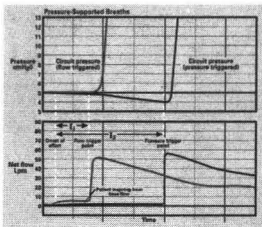

プレッシャーコントロール ベンチレーション [P.C.V.]

(オプション)

- I.タイムコンスタントモードとI:Eコンスタントモードの選択ができ、フローバイと併用できるので、小児の換気も可能になりました。
- I.R.V.も可能です。

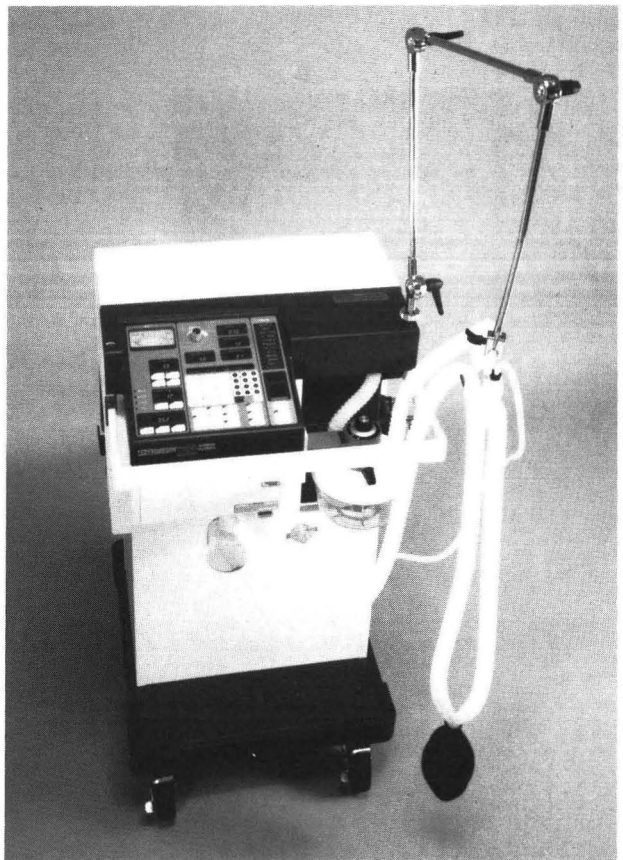

承認番号：60B輪第939号


The Future Begins.....

7200は、常に成長をしつづけるベンチレータです。

スターシンク

STAR SYNC

小児用人工呼吸器インファントスターに新機能搭載
SIMV・ASSISTが可能になりました!

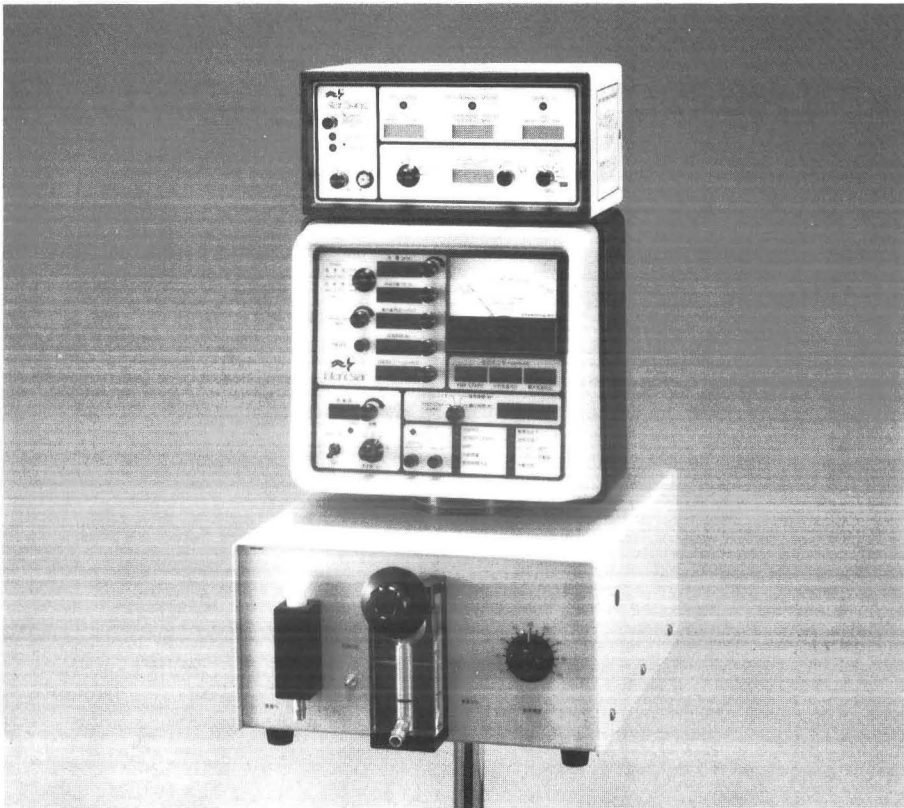

- インファントスターにオプションとして簡単に取付けることができます。
- 小児用人工呼吸器でのSIMV・ASSISTモードが可能になります。
- 腹部センサーを使用して患者のトリガーを容易に感知することができます。
- SIMVモード時のモニター機能も内蔵され、自己診断機能で装置の正常作動が容易に確認できます。
- 後部パネルにはアナログ出力とRS-232シリアル出力が装備されています。
- 無呼吸バックアップ換気モードがあるため、患者の安全が守られます。
- ソフトのバージョンアップで機能を拡張することができます。

03B輪第637号



未来にける技術の専門商社
株式会社 **アムコ**

〒102 東京都千代田区飯田橋4-8-7 医科第二部直通電話 ☎03(3265)4266

大阪06(942)5971 名古屋052(741)6051 福岡092(441)7641 札幌011(241)4428 仙台022(223)4060 埼玉048(648)3241 関西03(3878)7220
神奈川0462(22)7221 金沢0762(37)6490 京都075(603)6631 神戸078(271)7121 広島082(223)2511 高松0878(68)3201