




# ポール人工鼻フィルター

(呼吸器回路用フィルター)


## 麻酔、人工呼吸時の院内感染の防止に

### 99.999%以上の


### 細菌除去効率を発揮

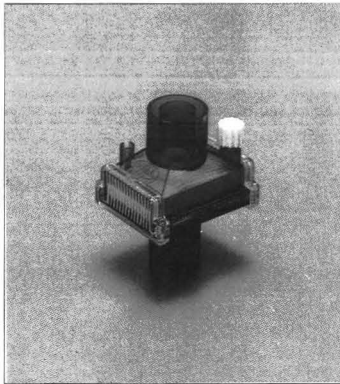

BB25A

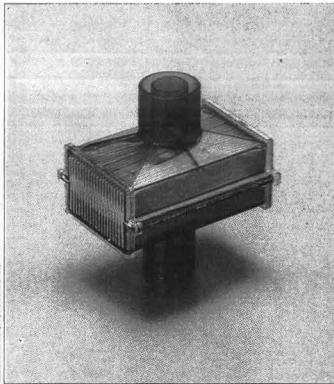


HME15-22

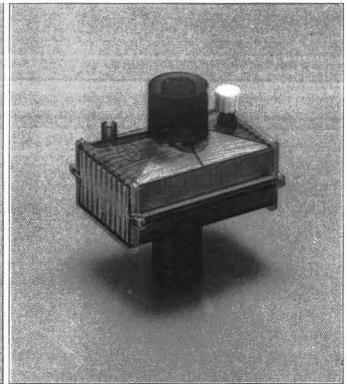


HME15-22M


○ろ過のメカニズム

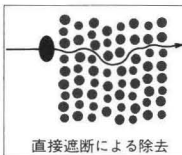

直接遮断による除去

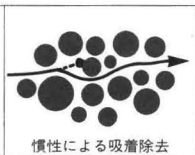

慣性による吸着除去

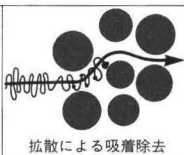

拡散による吸着除去

患者と回路の間を遮断し、細菌、異物による相互の汚染を防止します。

*Pseudomonas diminuta* (約0.3ミクロン) および MS-2バクテリオファージ(約0.02ミクロン)を使用したチャレンジテストにより99.999%以上の除去効率を確認しています。

輸入発売元

日本ポール株式会社 バイオメディカル部

〒141 東京都品川区西五反田1-5-1 野村證券ビル6F

TEL 03 (3495) 8310