

NEWPORT COMPASS

患者換気モニター コンパスVM200

呼吸管理をより安全に、より確実に！
バックアップ換気機能がついて、
さらにグレードアップ!!

コンパスVM200はニューポート・ベンチレーターモデルE200“ウェーブ”専用開発された呼吸換気量、吸入酸素濃度モニターです。E200本体横に取り付けるだけで簡単に使用できます。



○コンパスを使用するにはニューポートE200の専用カート (Cat No. CRT200A) が必要になります。



◆ 換気量測定

最新のホットフィルム方式を採用しています。測定精度は1~2,000m^lの範囲で、わずか±5%です。

◆ パラメーター

呼気1回換気量、呼気分時換気量、I:E比、吸入酸素濃度、呼气流速の5種類の計測が切り換えにて表示可能です。

- ・BIAS FLOW (連続流) の影響を受けない正確な換気量測定。
- ・簡単かつスムーズな校正。
- ・分時換気量、吸入酸素濃度に関する2種類の警報機能による高い安全性。
- ・流量ランプの監視により auto-PEEP、呼吸回路のリークも検出できます。

02B輪第0671号



本社 東京都港区東麻布2-3-4 〒106
☎03(3586)1421 FAX03(3586)1420


東京 東京都品川区勝島1-5-21 東神ビル2F 〒140
☎03(5762)3011 FAX03(5762)3021
技術センター 札幌 札幌 札幌 ☎03(5762)3006 FAX03(5762)3036
仙台 仙台 仙台 ☎011(717)0350 FAX011(758)3901
名古屋 名古屋 名古屋 ☎022(275)5952 FAX022(273)3392
大阪 大阪 大阪 ☎052(775)7800 FAX052(775)7830
九州 九州 九州 ☎06(308)8311 FAX06(308)8353
☎092(271)4695 FAX092(271)4669

SLE2000 NEONATAL VENTILATOR

SLE2000 ネオネーターベンチレーター

[新生児用人工呼吸器]

時代はより快適な自発呼吸の補助を求めています

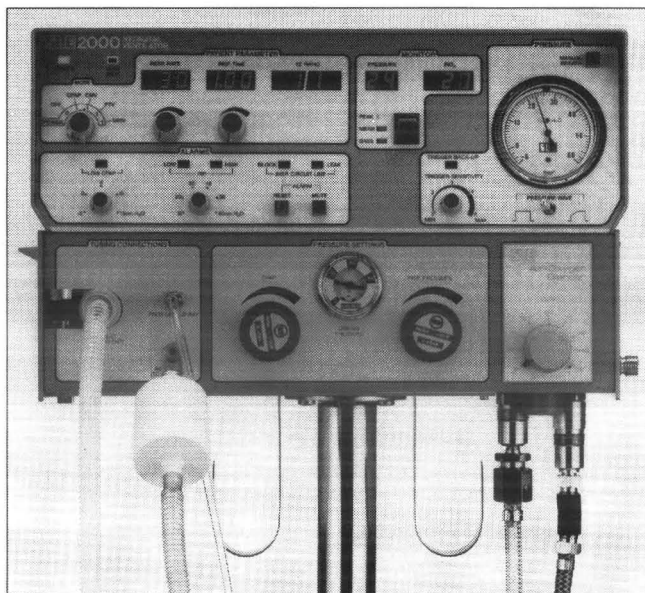

承認番号 5B輸第60号

あのPTVモード(患者トリガー換気)が
オプションなしの低価格で実現しました。

- 極めて速いレスポンス時間で、呼吸仕事量の大幅軽減をはかりました。
- 呼気弁、ダイヤフラム機構が取り除かれているため (Valveless) 呼吸抵抗が少ない上、メンテナンス面においても優れています。
- CMV、PTV、SIMV、CPAPのモードが可能。
吸気圧波形も、矩形波、漸増波の2種類から選ぶことができます。



本社 東京都港区東麻布2-3-4 〒106
☎03(3586)1421 FAX03(3586)1420

東	京	東京都品川区勝島1-5-21 東神ビル2F 〒140
		☎03(5762)3011 FAX03(5762)3021
技術センター		☎03(5762)3006 FAX03(5762)3036
札幌	仙台	☎011(717)0350 FAX011(758)3901
		☎022(275)5952 FAX022(273)3392
名古屋	大阪	☎052(775)7800 FAX052(775)7830
		☎06(308)8311 FAX06(308)8353
九州		☎092(271)4695 FAX092(271)4669