

在宅、救急、移動に！

オリジン人工呼吸器 **Puppy-2**



定常流循環タイムサイクル
プレッシャーリミット I M V

■小型、軽量

寸法：290 (W) × 220 (D) × 170 (H) mm

重量：約 7 Kg

■コンプレッサー内蔵

流量：20～60 l/分

吸気圧力：10～60 cmH₂O

■バッテリー内蔵

稼働時間：約 1 時間

■酸素濃度も調節可能 (オプション)

酸素濃度：21～90% (酸素濃縮器使用可能)

ORIGIN オリジン 医科工業株式会社


本 社 〒113 東京都文京区西片 1-20-7

TEL.03(3815)4621(代) FAX.03(3815)4691

関西営業所 TEL.0742(61)6748 FAX.0742(61)8911

絶対湿度を指標にして給湿度が任意に設定できる！

ORIGIN オリジン加温加湿器 ABS-300

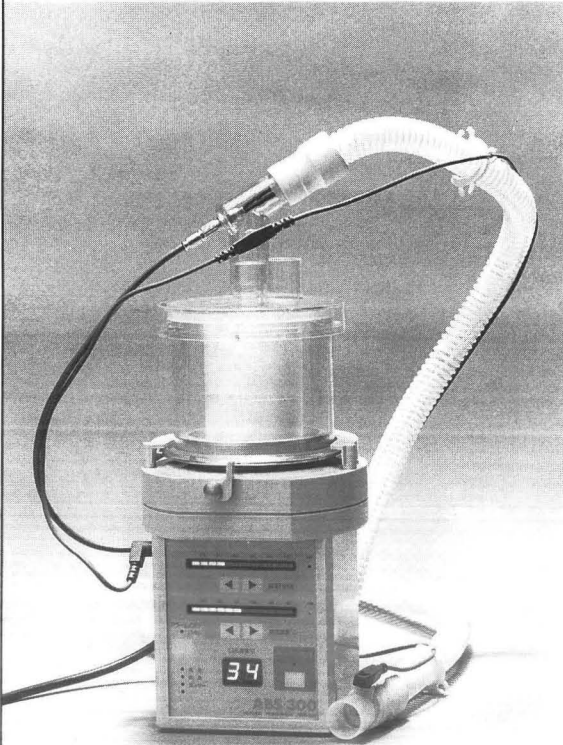

●絶対湿度 mg/l が給湿度の指標


必要な給湿度は絶対湿度を指標にして口元温度と相対湿度で明確に設定することができます。

●吸気回路の結露を最小限に防止

吸気の相対湿度を100%ではなく、80~90%に制御して回路内の結露を顕著に減少させます。

●吸気回路結露防止の必要性

- 結露水が誤って肺に吸入されると肺合併症の原因にもなります。
- 結露を防止すると呼吸回路の細菌汚染が有意に減少するとの報告があります。
- 特に小児用回路では結露水が通気抵抗となります。
- 結露を防止すると加湿水の消費が $\frac{1}{2}$ ~ $\frac{1}{3}$ に減少します。
- ウォータートラップの排水負担が軽減されます。

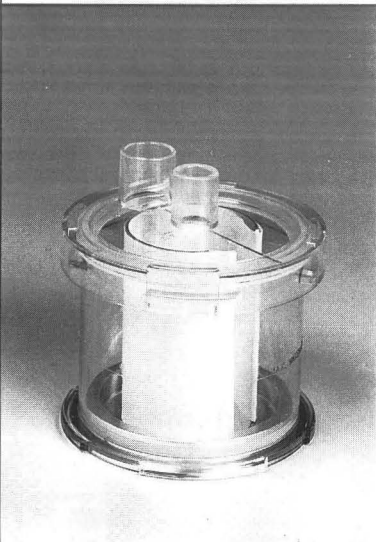

加湿水槽 H0022

地球にやさしい再使用型

- 滅菌、消毒して再使用できます。
- 消耗品は濾紙だけでするので非常に経済的です。
- 各社加温加湿器に使用できます。

オリジン加温加湿器 ABS-300 の他に Fisher & Paykel 社製加温加湿器、Marquest 社製加温加湿器に使用できます。

承認番号04B第0094号

ORIGIN オリジン医科工業株式会社

本社 〒113 東京都文京区西片1-20-7
TEL 03 (3815)4621(代) FAX 03 (3815)4691
関西営業所 TEL 0742 (61)6748 FAX 0742 (61)8911